

BRUKSANVISNING

SWASH[®] CLEANING WIPES 48 & 24-PACK

Produktkod: Lo5012-48 (UDI-DI: o8717127938216) / Mo5012-48 (UDI-DI: o8717127938223)
/ Mo5012-24 (UDI-DI: o8720663610485)


Användare: Professionell eller vårdgivare

Avsedd ändamål

Swash[®] Cleaning Wipes är avsedda för inkontinensrensning av inkontinenta och/eller sängliggande patienter som en infektionsförebyggande åtgärd.

Stödmaterial:

- Engångshandskar
- Papperskorg
- Inkontinensmaterial (om nödvändigt)
- Rena kläder och/eller linne (om nödvändigt)

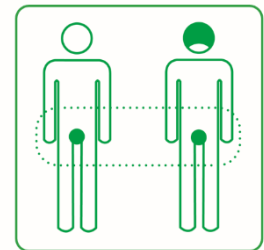

Användningsinstruktioner:

Rengör det smutsiga området med ett tillräckligt antal våtservetter. Använd den återförslutbara etiketten för att stänga förpackningen efter varje användning. Detta säkerställer att dukarna inte torkar ut. Använd varje paket endast för en person. Se nedan för detaljerad procedur.

Detaljerad procedur:

Swash[®] Cleaning Wipes kan förvaras på avdelningen på en central plats eller bredvid vårdtagarens säng.

- 1 Innan du börjar, tvätta händerna och ta på dig ett par engångshandskar.
- 2 Berätta för vårdtagaren vad du ska göra och fortsätt att kommunicera under hela tvättproceduren.
- 3 Låt vårdtagaren ligga i ryggläge med en kudde under huvudet. Låt vårdtagaren ta av sig sina ytterkläder; hjälp vid behov vårdtagaren med detta.
- 4 Ta bort våta och smutsiga inkontinensmaterial.
- 5 Öppna paketet med Swash[®] Cleaning Wipes och ta ut en servett. Tvätta underlivet med en Swash[®] Cleaning Wipes. Använd så många våtservetter som behövs. Huden torkar av sig själv genom avdunstning av lotionen. Torka vid behov hudvecken genom att torka med silkespapper.
- 6 Be vårdtagaren att vända sig på sin sida och ge stöd vid behov. Rengör den nedsmutsade mellangårdregionen (rumpan och svanskotan) hos vårdtagaren med en Swash[®] Cleaning Wipe. Använd så många våtservetter som behövs för att avlägsna all avföring och/eller urin från huden. Placera helst det använda Swash[®] Cleaning Wipes inuti inkontinensmaterialet.
- 7 Inspektera mellangårdregionen för inkontinensassocierad dermatit och andra hudtillståndsvARIABLER.
- 8 Om vårdtagaren riskerar att få inkontinensassocierad dermatit (IAD) eller om IAD behöver behandlas, fortsätt med protokollet för Swash[®] Perineum Gloves/ Swash[®] Perineum Wipes eller Swash[®] Perineum+ Wipes.
- 9 Ge vårdtagaren nytt, rent och torrt inkontinensmaterial. Byt sängkläder om de är våta eller smutsiga och klä på vårdtagarna igen och ställ honom/henne i önskad position.
- 10 Kasta det tomma paketet av Swash[®] och våtservetter i papperskorgen. SPOLA INTE Swash[®] Rengöringsservetter i toaletten!
- 11 Rapportera eventuella förändringar i hudens tillstånd efter mellangårdtvättningen.
- 12 Upprepa denna procedur efter varje urin- eller fekal inkontinens.

UPPSEENDE:

- Se alltid till att ta hänsyn till patientens känslor, komfort och avskildhet.
- Varje paket ska endast användas för en person. Resterande tvättlappar får användas till samma vårdtagare.
- Endast lämplig för extern användning.
- Spola inte ner tvättlapparna i toaletten. Kasta den tomma förpackningen med Swash® och våtservetter i soptunnan.

KONTRAIKATIONER:

- Om vårdtagaren vägrar att använda den.
- Om det är känt att vårdtagaren är känslig eller allergisk mot en eller flera av ingredienserna.
- On icke intakt hud och öppna sår.



PIKTOGRAM I PAKET:

	Temperaturgräns		Använd inom 1 månad efter öppnandet
	Håll borta från solljus		Kasta till soptunnan
	Håll torrt		Mörka inte
	Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningen		Produkt fri från latex
	Återanvänd inte		Tillverkad i ett rent rum
	Icke steril		Produkten innehåller inte doft
	Medicinsk utrustning		Produkten innehåller doft
	CE-märkning		Spola inte
	Batchkod		Se bruksanvisningen eller se elektroniska bruksanvisningar
	Tillverkare		
	Använd efter datum		
	Unik enhetens identifierare		

Information i detta protokoll med speciell användning av Swash® Cleaning Wipes för rengöring av mellangårdsregionen hos inkontinensvårdstagare. Ytterligare insatser och steg kan läggas till detta protokoll enligt andra protokoll och riktlinjer på din vårdinrättning.

Arion Manufacturing B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen, the Netherlands
+31 (0)45 209 4000 • manufacturing@arion-group.com • www.arion-group.com