Vendapress


Självhäftande Flexibelt Bandage

Produkt

Denna produkt är konstruerad från en kom-bination av polyesterfiberns elastiska och höga styrka och en latexbeäggning som möjliggör ytor som är självhäftande. Man kan inte känna av någon klibbighet på någon sida av bandaget, men det häftar fullständigt i sig själv.

Fastnar inte på hud, päls eller i sår.

Fördelar

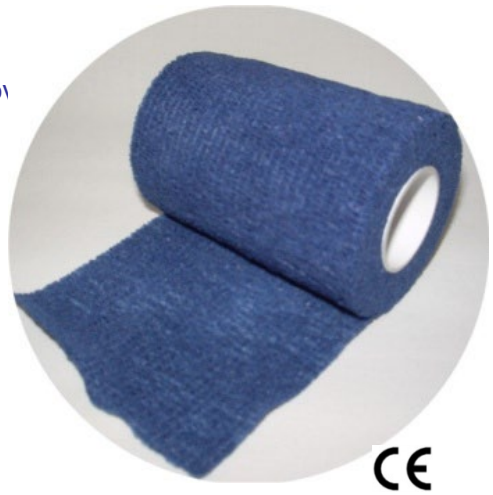

- Riva av, det kan rivas av mycket enkelt och smidigt
- Kan användas i olika tjocklekar och till alla kroppsdelar vid behov
- Självhäftande, inget behov av klammer eller tejp
- Behåller sin originalstorlek – dras ej samman
- Mjukhet, den är mycket mjuk och len, mycket behaglig för hud
- Elasticitet, mycket god elasticitet, och god tänjbarhet
- Bandaget andas
- Snabbt och enkelt att ta bort, lämnar inga klisterrester

Användning

- En bred användning inom sjukvård och personskydd
- Fixering av ex. brännskadekompresser
- Elastiskt förband, plåsterförband och skyddsförband vid monteringsarbeten.
- Första hjälpen produkt vid ex. vrickning

Detta är elastisk självhäftande binda (kohesiv binda). Så här lägger du den runt ett knä på ett bra och säkert sätt:

1. Förbered
Se till att huden är ren och torr. Böj knät lätt (ca 20–30°) – det gör att bindan inte blir för stram när du rör dig.

2. Börja under knät
Starta några varv strax under knäleden (på vaden) för att fästa bindan. Linda 1–2 varv utan att dra för hårt.

3. Linda över knät
Fortsätt uppåt i ett **åttamönster**:

Gå snett över knät
Runt ovanför knät (lårets nedre del)
Sedan tillbaka snett ner igen

Upprepa detta så att knäskålen får stöd men inte trycks direkt.

4. Täck lagom
Varje varv ska överlappa föregående med ungefär **hälften av bredden**.

5. Avsluta ovanför knät
Fäst med några varv ovanför knät. Bindan fäster i sig själv, så ingen tejp behövs.

6. Kontrollera
Det ska kännas stabilt men inte stramt. Kontrollera att: Ingen domning eller stickningar uppstår
Att huden inte blir kall eller blå

Art.nr	Bredd	Längd	Färg
8133-blå	*7,5 cm*	*4,5 m*	*Blå*

AlphraMedic